



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Массажный матрас FULL RELAX с
функцией ИК-прогрева (МС 03Н)**



СОДЕРЖАНИЕ


СХЕМА ДЛЯ МАССАЖА	3
СХЕМА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	3
МЕТОД РАБОТЫ	3
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ	4
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	4

СХЕМА ДЛЯ МАССАЖА



1. Шейный массаж
2. Массаж поясницы
3. Массаж бедра
4. Массаж всего тела

СХЕМА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

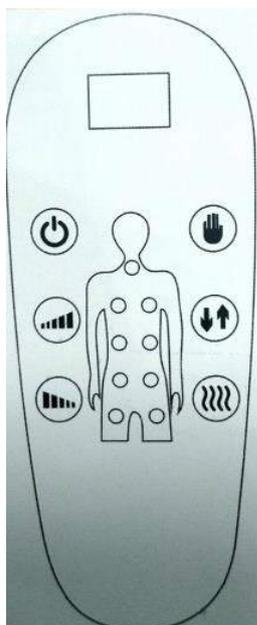

МЕТОД РАБОТЫ

Положите матрас на кровать или диван, затем подключите:

1.ON / OFF Нажмите один раз, чтобы запустить функцию массажа в течение 10 минут (на цифровом экране отображается 10 минут); Нажмите дважды, чтобы запустить функцию массажа 20 минут (на цифровом экране

отображается 20 минут); Нажмите три раза, чтобы запустить функцию массажа 30 минут (на цифровом экране отображается 30 минут); Нажмите четыре раза, чтобы остановиться (на цифровом экране появится надпись «OFF»);

2. ФУНКЦИИ: на выбор доступно 8 моделей (F1-F8). Автоматическая функция устанавливается при включенном питании (на цифровом экране отображается «AU»).

3. ПРОЧНОСТЬ: есть 5 уровней силы выбора (S1-S5). Средняя сила устанавливается при включении питания (на цифровом экране отображается «S3»).

4. Частота - 5 градусов (H1-H5). Средний устанавливается при включенном питании (на цифровом экране отображается «H3»).

5. КНОПКА ДЛЯ ИНФРАКРАСНОЙ СИСТЕМЫ: нет инфракрасной функции при включенном питании, нажмите кнопку, чтобы запустить инфракрасную функцию. (цифровой экран показывает «ON»)

Пожалуйста, выключите и отключите питание после использования.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

1. Пожалуйста, отключите источник питания после использования или перед чисткой.

2. Не держите его в сухом месте.

3. Не кладите его рядом с источником тепла, не кладите на него вес и не наступайте на него.

4. Переключайтесь от него, когда вы испытываете дискомфорт из-за раздражения.

5. Следует использовать его с компанией медицинских работников

6. Люди с сердечными заболеваниями или после хирургической операции не применяются 7. Беременные женщины не применяются

8. Пожалуйста, обратите внимание, что матрас выделяет тепло при работе.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Пожалуйста, отправьте его в указанное место для ремонта при поломке трансформатора. 2. Гарантия. Один год.

3. Пожалуйста, очистите его нейтральным моющим средством и мягкой тканью.
4. Не используйте едкие чистящие средства.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**